




SciCan OPTIM 1

YKSIVAIHEINEN PUHDISTUS-
JA DESINFIOINTIAINE

Aktiivinen ainesosa: **0,5 % vetyperoksidi**

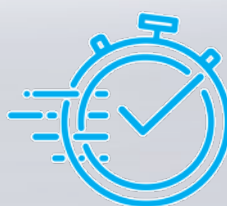

1 MINUUTIN
KOSKETUSAIKA*

Nopea ja hellävarainen

OPTIM 1:n ansiosta sinun ei tarvitse tehdä kompromisseja tehon ja suojan välillä. Nopealla laajavaikutteisella kosketusajallaan se on yksi nopeimmista ja tehokkaimmista puhdistus- ja desinfiointiaineista. Se on myös turvallinen ja hellävarainen niin sinulle kuin pinnoillekin. OPTIM 1:n avulla voit olla varma siitä, että menettelet vaatimusten mukaisesti ja suojelet potilaitasi, henkilökuntaasi ja ympäristöä: kaikki on täydellisesti tasapainossa.



Nopea ja laajavaikutteinen desinfiointiaine

Pintojen on oltava kosteita koko kosketusajan, jotta ne desinfioituvat.

- › **adeno-, polio-, hiiren norovirus 30 sekunnissa standardin EN 14476 mukaisesti**
- › **mykobakteereja ja sienitauteja torjuva 1 minuutissa**
- › **bakteereja ja viruksia torjuva 30 sekunnissa standardin EN 13727 ja EN 14476 mukaisesti**
- › **täydellinen viruksia tappava vaikutus 2 minuutissa RKI-/DVV-standardin (polio-, adeno-, hiiren norovirus, SV40) mukaisesti**
- › **tehokas 1 minuutissa standardin EN 16615 mukaisesti**
- › **erinomainen kostutuskkyky: pysyy kosteana riittävän kauan, jotta kosketusaika voidaan varmistaa**



Yhteensopiva

Yhteensopiva monenlaisten kovien, ei-huokoisten materiaalien ja pintojen kanssa.



Turvallinen ja hellävarainen

- › **ei keinotekoisia tuoksuja**
- › **myrkytön**
- › **ei ärsytä ihoa, silmiä tai hengityselimiä**
- › **ei GHS-vaarakuva- tai -huomiosanoja tai -vaaralausekkeita**
- › **ei jätä aktiivisia jäännöksiä, ei edistä mikrobilääkeresistenssiä**



Ympäristöystävällinen

Aktiivinen ainesosa vetyperoksidi hajoaa vedeksi ja hapeksi eikä jätä aktiivisia jäänteitä, mikä vähentää sen ympäristövaikutuksia.



Tehokas yksivaiheinen puhdistusaine

Tehokas, yksivaiheinen desinfioiva puhdistusaine poistaa desinfioidessaan orgaaniset jäänteet.

COLTENE

* Tehokas yhdessä minuutissa eurooppalaisten standardien EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 16615 (katso takaosa) mukaisesti. Saksassa vaaditun RKI:n/DVV:n standardin mukaisesti OPTIM 1 on kahden minuutin sisällä TÄYDELLISESTI VIRUKSIA TAPPAVA.



Lyhyet kosketusajat

OPTIM 1:n tappamiskykyyn on todistettu olevan erinomainen. Sen tasalaatuiset kosketusajat ovat lyhyitä, mikä varmistaa vaatimustenmukaisuuden ja sen, että desinfiointi on saavutettu.

OPTIM 1 on todistettu tehokkaaksi vaikeasti tapettavien taudinaiheuttajia, kuten adeno-, polio- ja hiiren norovirusia, vastaan, mikä varmistaa, että tilasi ovat suojassa vaarallisilta taudinaiheuttajilta.

OPTIM 1:n Tehoa koskevat väitteet ja käyttösuositukset

Pintadesinfiointi mekaanisesti	STANDARDI	TESTIORGANISMIT	KOSKETUSAIKA [†]	LIKAANTUMISE-HDOT	LÄMPÖTILA	KÄYTTÖ-KONSENTRAATIO
Viruksia tappava	EN 14476	Poliovirus tyyppi 1, adenovirus tyyppi 5, hiiren norovirus kanta S99 Berliini	30 sec.	Likaiset olosuhteet	Huoneenlämpö	Laimentamaton
Täydellisesti viruksia tappava (vain Saksa)*	"hier ist nochmal der ganze Satz: RKI-suositus, Bundesgesundheitsblatt (liittovaltion terveystiet.) 01/2004"	Poliovirus tyyppi 1, adenovirus tyyppi 5, hiiren norovirus kanta S99 Berliini, polyoomavirus SV-40	2 min.	Likaiset olosuhteet	Huoneenlämpö	Laimentamaton
Bakteereja tappava	EN 13727, EN 16615**	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa	30 sec. 1 min.	Likaiset olosuhteet Likaiset olosuhteet	Huoneenlämpö Huoneenlämpö	Laimentamaton Laimentamaton
Mykobakteereja tappava	EN 14348	Mycobacterium terrae	1 min.	Likaiset olosuhteet	Huoneenlämpö	Laimentamaton
Fungisidinen tappava	EN 13624	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	1 min.	Likaiset olosuhteet	Huoneenlämpö	Laimentamaton
Hiivoja tappava	EN 13624, EN 16615**	Candida albicans	1 min.	Likaiset olosuhteet	Huoneenlämpö	Laimentamaton

* TÄYDELLISESTI VIRUKSIA TAPPAVA tarkoittaa, että desinfiointiaine kykenee deaktivoimaan vaipalliset ja vaipattomat virukset saksalaisten DVV:n testistandardien mukaan. Jotta täydellinen virustentappavuusvaatimus täyttyy, desinfiointiaineen on kyettävä deaktivoimaan adenovirus, poliovirus, SV40 ja hiiren norovirus.

Bakteereja tappava Pintadesinfiointi mekaanisesti:

** Rajoitukset - standardin EN 16615 mukainen testi: Koskee vain kosteuspyyhkeitä tuotenumero SCI33R18 / SCI33R18XL. Käytä OPTIM Liquid -nesteelle vain SciCan Dry WIPES -kuivapyyhkeitä tuotenumero SCI33R18 / SCI33R18XL.

Hiivoja tappava Pintadesinfiointi mekaanisesti:

** Rajoitukset - standardin EN 16615 mukainen testi: Koskee vain kosteuspyyhkeitä tuotenumero SCI33R18 / SCI33R18XL. Käytä OPTIM Liquid -nesteelle vain SciCan Dry WIPES -kuivapyyhkeitä tuotenumero SCI33R18 / SCI33R18XL.

[†]Pyhyi pinta ja varmista, että pinta pysyy märkänä kosketuksen aikana.

Puhdistusteho

yksivaiheinen puhdistusaine

Turvallisuus

GHS:n vaatimat vaarakuvakkeet

Ei tarpeen

Ei ärsytä silmiä

Kyllä

Ei ärsytä ihoa

Kyllä

OPTIM 1:n tilaustiedot

Käyttövalmiit, valmiiksi kyllästetyt pyyhkeet

OPTEU1-12W RTU-pyyhkeet 15 x 18 cm (12 x 160 arkki/kotelo)

Neste

OPTEU1-4x4 1 laatikko, 4 x 4 litraa

Lisätarvikkeet

FND30 Pumppu 1 gallonan pullolle

Dent4You AG
Bahnhofstrasse 2
CH-9435 Heerbrugg



EC REP

Coltène/Whaledent GmbH+Co. KG
Raiffeisenstraße 30
DE-89129 Langenau