




# SciCan OPTIM 1

PULITORE E DISINFETTANTE  
TUTTO IN 1

Ingrediente attivo: **0,5% perossido di idrogeno**

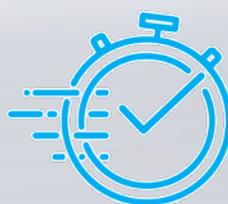

**1 MINUTO  
DI TEMPO  
DI CONTATTO\***

## Rapido e delicato

Con OPTIM 1 non c'è bisogno di fare compromessi tra efficacia e protezione. Con un tempo di contatto rapido e ad ampio spettro, è uno dei pulitori e disinfettanti più veloci e più efficaci. È anche sicuro e delicato per te e per le superfici. OPTIM 1 ti dà la sicurezza di essere in regola e di proteggere al meglio i tuoi pazienti, il personale e l'ambiente: l'equilibrio perfetto.



### Disinfettante rapido ad ampio spettro

Le superfici devono rimanere umide per l'intero tempo di contatto per poter essere disinfettate.

- › **Adeno, Polio, Murino Noro in soli 30 secondi secondo EN 14476**
- › **Tuberculocida e fungicida in 1 minuto**
- › **Battericida e virucida in 30 secondi secondo EN 13727 e EN 14476**
- › **Azione virucida completa in 2 minuti secondi gli standard RKI/ DVV (polio, adeno, murino noro, SV40)**
- › **Efficace in 1 minuto secondo EN 16615**
- › **Eccellente bagnabilità - resta bagnato a sufficienza per tutta la durata del tempo di contatto**



### Un pulitore efficace tutto in uno

Un efficace pulitore disinfettante tutto in 1 rimuove residui organici e disinfetta al tempo stesso



### Compatibile

Compatibile con molti materiali e superfici duri e non porosi.



### Sicuro e delicato

- › **Privo di profumi artificiali**
- › **Non tossico**
- › **Non irrita la pelle, gli occhi o il sistema respiratorio**
- › **Non richiede alcun pittogramma di pericolo, parole o frasi di avvertenza di GHS**
- › **Non lascia residui attivi; non contribuisce alla resistenza antimicrobica**



### Ecologico

L'ingrediente attivo, il perossido di idrogeno, si scompone in acqua e ossigeno senza lasciare residui attivi, riducendo così l'impatto ambientale.

**COLTENE**

\* Efficace in 1 minuto secondo gli standard europei; EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 16615 (vedi retro). Secondo lo standard richiesto RKI/DVV in Germania, OPTIM 1 ha un'azione VIRUCIDA COMPLETA entro 2 minuti.



## Rapidi tempi di contatto

I test rivelano che OPTIM 1 ha una prestazione di disinfezione superiore; i tempi di contatto affidabili sono più rapidi, garantendo sicurezza e fiducia nel buon esito della disinfezione.

I test rivelano che OPTIM 1 è efficace contro agenti patogeni difficili da eliminare quali adeno, polio e murino norovirus. In tal modo, puoi essere certo che il tuo edificio sia protetto da agenti patogeni pericolosi.

### OPTIM 1 Dichiarazioni di efficacia e raccomandazioni d'uso

| Disinfezione di superfici con azione meccanica | STANDARD                                                                                     | ORGANISMI TESTATI                                                                                  | TEMPO DI CONTATTO <sup>†</sup> | CONDIZIONI DI SPORCIZIA | TEMPERATURA          | CONCENTRAZIONE D'USO |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Virucida</b>                                | EN 14476                                                                                     | Poliovirus di tipo 1, Adenovirus di tipo 5, Murino norovirus ceppo S99 Berlino                     | 30 sec.                        | Condizioni di sporco    | Temperatura ambiente | Non diluito          |
| <b>Virucida completo (Solo Germania)*</b>      | Raccomandazione RKI, Bundesgesundheitsblatt (Gazzetta federale tedesca della sanità) 01/2004 | Poliovirus di tipo 1, Adenovirus di tipo 5, Murino norovirus ceppo S99 Berlino, Poliomaivirus SV40 | 2 min.                         | Condizioni di sporco    | Temperatura ambiente | Non diluito          |
| <b>Battericida</b>                             | EN 13727,                                                                                    | Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa                                  | 30 sec.                        | Condizioni di sporco    | Temperatura ambiente | Non diluito          |
|                                                | EN 16615**                                                                                   |                                                                                                    | 1 min.                         | Condizioni di sporco    | Temperatura ambiente | Non diluito          |
| <b>Tuberculicida / Micobattericida</b>         | EN 14348                                                                                     | Mycobacterium terrae                                                                               | 1 min.                         | Condizioni di sporco    | Temperatura ambiente | Non diluito          |
| <b>Fungicida</b>                               | EN 13624                                                                                     | Candida albicans, Aspergillus brasiliensis                                                         | 1 min.                         | Condizioni di sporco    | Temperatura ambiente | Non diluito          |
| <b>Fermentacida</b>                            | EN 13624, EN 16615**                                                                         | Candida albicans                                                                                   | 1 min.                         | Condizioni di sporco    | Temperatura ambiente | Non diluito          |

Battericida Disinfezione di superfici con azione meccanica:

\*\* Limitazioni / Restrizioni - Test secondo la norma EN 16615: applicabile esclusivamente alle salviette con codice articolo SCI33R18 / SCI33R18XL. Per il liquido OPTIM utilizzare esclusivamente le salviette asciutte SciCan con codice articolo SCI33R18 / SCI33R18XL.

<sup>†</sup> Pulire la superficie e assicurarsi che rimanga bagnata per il tempo di contatto.

### Efficacia di pulizia

Pulitore tutto in uno

### Sicurezza

**Pittogrammi di pericolo richiesti da GHS**

Nessuno richiesto

**Non irritante per gli occhi**

Sì

**Non irritante per la pelle**

Sì

### Informazioni ordine per OPTIM 1

#### Stracci pre-saturati pronti all'uso

**OPTEU1-12W** RTU stracci 15 x 18 cm (12 x 160 fogli/confezione)

#### Liquido

**OPTEU1-4x4** 1 confezione di 4 x 4 litri

#### Accessori

**FND30** Pompa per bottiglia da 1 gallone



**Coltène/Whaledent GmbH+Co. KG**  
Raiffeisenstraße 30  
DE-89129 Langenau