



VistaCool 3™

Système direct au drain de réduction thermique des eaux résiduaire produites par les autoclaves

ÉLIMINE L'UTILISATION DE BOUTEILLES À CONDENSAT

en refroidissant l'eau usée et en l'acheminant directement et automatiquement au drain.



Préserve la salubrité de votre cabinet

Contribue à prévenir la moisissure, la pourriture et la rouille causées par les déversements ou les fuites et les environnements humides créés par la vapeur qui s'échappe des bouteilles à condensat.



Protège les conduits d'évacuation

Empêche les eaux résiduaire produites par les autoclaves d'endommager la plomberie. Le mécanisme antirefoulement intégré respecte, voir surpasse les codes locaux de plomberie.



Contribue à la sécurité du personnel

Élimine la nécessité de manipuler des bouteilles d'eaux résiduaire brûlantes.


Permet d'économiser du temps

Système non électrique à autorégulation qui ne nécessite aucun entretien, ce qui se traduit en économie de temps.




Installez-le où bon vous semble.

La conception novatrice du nouveau VistaCool V7601 offre les mêmes avantages que ses prédécesseurs, mais occupe moins d'espace. Les brides de fixation incluses avec le système ainsi que son tuyau d'évacuation sous pression permettent une installation verticale ou horizontale pratiquement n'importe où.

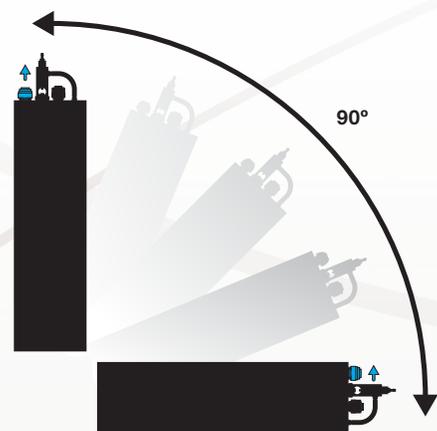

Spécifications du système

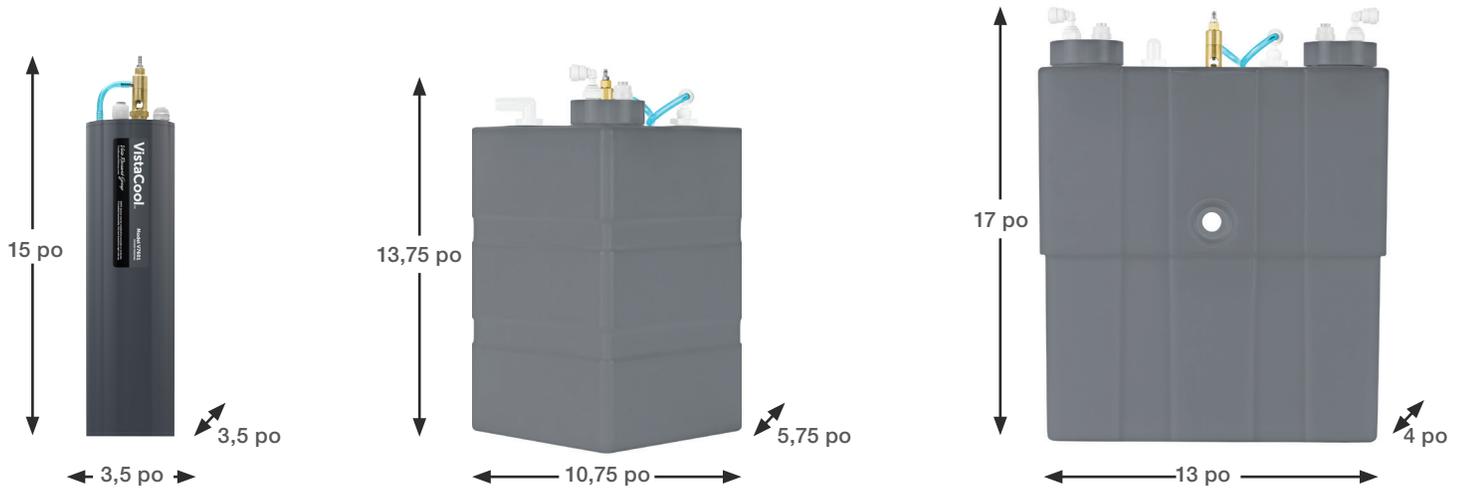

V7601 - Pour un autoclave

V7501 - Pour un autoclave

V7502 - Pour deux autoclaves

Remarque : Des bases réglables en hauteur par intervalle d'un demi-pouce (0,5 po à 5 po) sont offertes en option pour surélever les modèles V7501 et V7502. Article n° S7545 pour le modèle V7501; article n° S7547 pour le modèle V7502.


Exigences relatives à l'installation

Raccordement ¼ po à l'alimentation en eau froide : Des raccords d'alimentation, une vanne d'alimentation d'eau, un tube d'alimentation d'eau froide et un/des dispositif(s) antirefoulement double contrôle VistaCheck™ certifié(s) CSA sont inclus! Accessoire pour intervalle d'air offert séparément si requis par les codes des autorités locales.

Raccordement au conduit d'évacuation muni d'un siphon : Un ou des capteurs thermiques sont inclus pour s'assurer que les eaux résiduelles sont suffisamment refroidies pour être acheminées directement dans le conduit d'évacuation. Raccord en T de 1-1/2 po muni de raccords instantanés inclus avec les modèles V7501 et V7502.

D'une conception compacte, l'adaptateur d'évacuation à orifices multiples DrainHub™, en option, est recommandé pour le raccordement de plusieurs appareils au conduit d'évacuation afin d'économiser de l'espace.

Accessoires recommandés

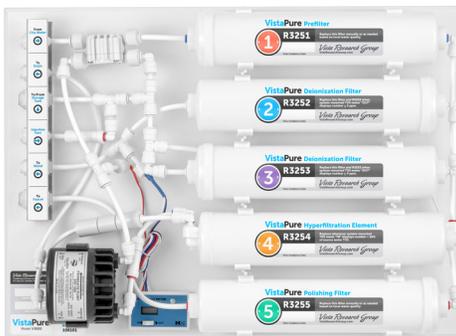

VistaPure™

Système de filtration d'eau

Fournit deux degrés d'eau de haute qualité pour les autoclaves, les bouteilles dentaires, les nettoyeurs à ultrasons et le cycle de rinçage des lave-instruments.

V3000

Distribué par :
SciCan Ltd.

1440 Don Mills Rd., Toronto, ON, Canada, M3B 3P9
Tél. : 416-445-1600
Sans frais : 1-800-667-7733
customerservice@scican.com



VistaPure™ AutoFill

Réapprovisionne automatiquement tout autoclave STATIM et BRAVO, nouveau ou ancien modèle, avec une eau de qualité distillée - voilà une vraie fonction mains libres.

S3020 - AutoFill pour STATIM
S3030 - AutoFill pour BRAVO

Distribué par :
SciCan Inc.

701 Technology Dr., Canonsburg, PA 15317, USA
Tél. : 724-820-1600
Sans frais : 1-800-572-1211
uscustomerservice@scican.com



DrainHub

Adaptateur d'évacuation à orifices multiples

Ce dispositif certifié CSA, en instance de brevet, permet d'y raccorder jusqu'à huit appareils—une incroyable économie d'espace, de coûts et de temps!

DH154 - Adaptateur à 4 orifices
DH158 - Adaptateur à 8 orifices

VistaPure™, VistaCool™ et DrainHub™
sont fabriqués par :

Vista Research Group
1244 County Road 1475, Ashland, OH 44805 USA
Tél. : 419-281-3927
VistaResearchGroup.com